



Набор инструментов
для реконструктивной
хирургии плеча

Набор инструментов для реконструктивной хирургии плеча

Титановый шовный анкер

Стерильный самосверлящий и самонарезающий титановый шовный анкер для артроскопической и открытой реконструкции плечевого сустава, оснащенный устойчивым к разрыву шовным материалом из волокна Super-Fiber® или полиэфирного волокна.



	Диаметр	Шовный материал / Иглы	Номер по каталогу
	3,0 мм	1 x лигатура Super-Fiber® диаметром 0,6 x 800, игла 4/8 - L25, на одноразовой отвертке	491803203
		1 x нерассасывающаяся лигатура, игла треуг. 3/8 - L25, на одноразовой отвертке	491803303
	5,0 мм	2 x лигатуры Super-Fiber® диаметром 0,6 x 800, игла 4/8 - L25, на одноразовой отвертке	491803205
		2 x нерассасывающихся лигатуры, игла треуг. 3/8 - L25, на одноразовой отвертке	491803305
	6,5 мм	2 x лигатуры Super-Fiber® диаметром 0,6 x 800, игла 4/8 - L25, на одноразовой отвертке	491803206

Endospike

Иглодержатель для артроскопического наложения шва на мышцы плечевого пояса и протягивания нити при рефиксации ротаторной манжеты к большому бугорку плечевой кости с использованием шовных анкеров.



		Номер по каталогу
	Плечевой шовный инструмент Endospike	891403000
	Иглы для Endospike стерильные, одноразовые, по 5 шт. в упаковке	491403000



Канюли троакара

Прозрачные стерильные канюли для рабочих инструментов с двойным уплотнением и внешним ребрением для улучшенной фиксации в мягких тканях. В комплект поставки входит одноразовый канюлированный обтуратор.

Многоразовые троакары

Троакары многократного использования позволяют вводить одноразовые канюли в полость сустава по 4 мм направляющему стержню или непосредственно через разрез.

Цветовая кодировка позволяет быстро подобрать троакар к соответствующей троакарной канюле.

Канюли троакаров, стерильные, по 5 шт. в упаковке			Цветовая кодировка	Многоразовые троакары	
Внутренний диаметр	Рабочая длина	Номер по каталогу		Форма	Номер по каталогу
6,0 мм	70 мм	49120.3760	красный	тупоконечный конический	891203560
				тупоконечный канюлированный	891203760
	85 мм	49120.3860	зеленый	тупоконечный конический	891203660
				тупоконечный канюлированный	891203860
8,5 мм	70 мм	49120.3785	синий	тупоконечный конический	891203585
				тупоконечный канюлированный	891203785
	85 мм	49120.3885	желтый	тупоконечный конический	891203685
				тупоконечный канюлированный	891203885



Направляющий и маркировочный стержень, диаметр 4 мм, рабочая длина 326 мм		Номер по каталогу
		8863.75

Направляющий и маркировочный стержень

Стержень диаметром 4 мм, применяемый для введения и смены троакарных канюль артроскопа и канюль инструментов.



Инструмент для пересечения лигатур

Предназначен для разрезания нитей, устойчивых к разрыву, и полиэфирных нитей в случаях, когда шов был наложен артроскопически.

Инструмент для пересечения лигатур		Номер по каталогу
		891603000

Набор инструментов для реконструктивной хирургии плеча

Зажим для лигатуры

Заостренный лигатурный зажим используется для прокалывания и выполнения прямого и обратного протягивания нитей при повреждениях Банкарта или SLAP-повреждениях, а также при артроскопической рефиксации ротаторной манжеты.

Тупоконечный лигатурный зажим используется для артроскопического перемещения лигатур.

Зажимы

Зажимы для захвата и репозиции сухожилия надостной мышцы.

Ручные инструменты




Толкатель узлов применяется для наложения и затягивания скользящих узлов


Лигатурный крючок применяется для эндоскопического перемещения лигатур

Лезвие, применяемое для отсоединения мягких тканей от края суставной впадины

Рашпили, применяемые для артроскопической «очистки» кости в области суставной впадины при повреждениях Банкарта или SLAP-повреждениях и большого бугорка плечевой кости при реконструкции ротаторной манжеты



		Номер по каталогу
	Лигатурный зажим, прямой, травматический заостренный	891303200
	Лигатурный зажим, изогнутый на 45° вверх, травматический заостренный	891303230
	Лигатурный зажим, прямой, атравматический	891303300

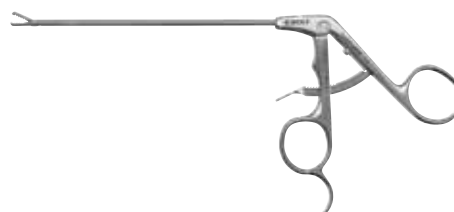

		Номер по каталогу
	Зажим	8488.096



Толкатель узлов

Номер по каталогу

89150.3000



Лигатурный крючок

89150.3003



Лезвие, с дистальным режущим краем

89160.3001



Лезвие, изогнутое кверху на 15°

89160.3015



Рашпиль, выпуклый

89160.3002



Рашпиль, вогнутый

89160.3003



Рашпиль, прямой

89160.3005